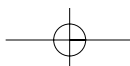



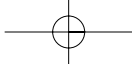
Entific Medical Systems

Blauw-roodlaan 152c • 2718 SK Zoetermeer

Tel: +31-793619280 **Fax:** +31-793619274

E-Mail: info@entific.nl **Visit:** www.entific.com



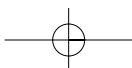


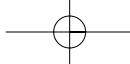
Verrijk uw BAHA[®] -ervaring

– een handleiding voor BAHA[®] accessoires

baha[®]
by Entific Medical Systems

sound sense for a better life





Technische data

Kleur	Zwart
Grootte l×b×h en gewicht	8×8,5×7 mm, 0,5 g
Batterijverbruik	Heel gering (50 µA)
Electrische output 70 dB SPL, 1 000 Hz	1 mV _{RMS} (vrij veldmeting onder hoek van 0°)

Hypercardiod response



Technische data

Kleur	Zwart
Grootte l×b×h en gewicht	57×36×19 mm, 28 g
Totale lengte kabeltje:	
Compact en Classic 300	135 cm
Cordelle II	190 cm
Verbindingsnoer	135 cm
Isolating transformer	1:1

Het is ons doel om de ervaringen van de BAHA®-gebruiker in zoveel mogelijk luisteromstandigheden te verbeteren. Daarom hebben wij een reeks van accessoires ontwikkeld die u helpen nog meer uit uw BAHA® te halen. Alle accessoires die in deze brochure beschreven zijn, kunnen direct aangesloten worden op het aangegeven type BAHA® toestel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Audioloog of uw K.N.O. arts.

Richtmicrofoon – BAHA® Compact

De nieuwe, zeer kleine richtmicrofoon is speciaal ontwikkeld voor BAHA® Compact-gebruikers. De richtmicrofoon versterkt het geluid dat van voren komt maar dempt de kracht van het geluid dat vanaf de zijkant en van achter komt. Dit verbetert het verstaan van spraak in omstandigheden waarin u luistert naar iemand die relatief dichtbij u staat in een omgeving vol van achtergrondgeluiden, zoals in restaurants, winkels, tentoonstellingsruimten en op vliegvelden. De microfoon is GSM-proof, waardoor zonder problemen gebruikt kan worden gemaakt van een mobiele telefoon.



De richtmicrofoon kan geleverd worden als een linker- en een rechter versie, afhankelijk of u uw BAHA® aan uw linker of rechterzijde draagt.

Bestelinformatie

Richtmicrofoon Compact, links	90286
Richtmicrofoon Compact, rechts	90287


Audio Adapter


De audio adapter biedt gebruikers de mogelijkheid hun BAHA®-toestel direct aan te sluiten op stereo-installaties, tv's en HI-Fi apparatuur. De audio adapter kan ook gebruikt worden in combinatie met FM- of IR systemen. Er zijn 2 verschillende versies verkrijgbaar, afhankelijk van het type BAHA® dat u draagt, Compact, Classic of Cordelle II. Er is ook een verbindingssnoetje verkrijgbaar voor die BAHA® gebruikers die 2 BAHA® toestellen dragen.



Bestelinformatie

Audio-adapter voor de Compact en Classic 300	90065
Audio-adapter voor de Cordelle II	90067
Verbindingsnoer	90068

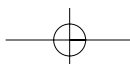

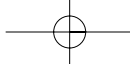

Luisterspoel voor de ringleiding

De luisterspoel voor de ringleiding biedt u versterkte geluidskwaliteit en een verbeterd spraakverstaan in gebouwen die voorzien zijn van een ringleiding, zoals bijvoorbeeld scholen, kerken, theaters en bioscopen. Het kan ook met uw ringleiding thuis gebruikt worden om geluid op te vangen van de telefoon (indien deze voor gebruik van ringleiding geschikt is) en van het televisietoestel. Er zijn twee verschillende modellen verkrijgbaar. Een model voor de BAHA® Compact en een model voor de BAHA® Classic.

De nieuwe Compact luisterspoel is voorzien van een M-MT-T schakelaar. Dit maakt het mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van de ringleiding en de microfoon van uw BAHA® toestel. Deze schakelaar biedt u tevens de mogelijkheid om de ringleiding uit te zetten, zonder de luisterspoel van uw BAHA® toestel los te klikken.



Bestelinformatie

Luisterspoel voor de ringleiding t.b.v. de BAHA® Compact	90185
Luisterspoel voor de ringleiding t.b.v. de BAHA® Classic 300	HCB 527-0

Microlink BAHA® FM-ontvanger

Phonak heeft een kleine FM-ontvanger ontwikkeld voor de BAHA® Compact zodat Compactdragers hun toestel kunnen gebruiken in combinatie met de Phonak FM zenders, nl. de HandyMic, de TelCom en de Campus S. Voor meer informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Phonak distributeur (www.phonak.com).



Technische data

Kleur	Zwart
Grootte lxb en gewicht	56x8 mm, 2 g
Geveiligheidsdata aangebracht op Compact (luisterspoel in T stand)	Output force level 100 mA/m (1 000 Hz) is gelijk aan een akoestische input van 76 dB SPL (met de luisterspoel in de uit-stand)
Geveiligheidsdata aangebracht op Classic 300	Output force level 100 mA/m (1 000 Hz) is gelijk aan een akoestische input van 76 dB SPL

